

A person wearing a brown t-shirt, brown pants, and a grey and white beanie is climbing a rock face. They are using a rope and carabiners to ascend. The rock face is composed of large, light-colored stones. The person's hands are visible, gripping the rock and the rope. They are wearing white wristbands on both wrists. The background is a solid yellow color.

BLUEMEDICAL

Una empresa del grupo Translumina

SUMMIT

CATÉTER CTO


C r u z



Catéter de balón PTCA

Las oclusiones totales crónicas son hoy en día el reto más difícil al que se enfrentan los médicos, ya que los vasos con estenosis grave necesitan un tratamiento y productos específicos.

El catéter de balón Summit PTCA es el ayudante definitivo del médico en el tratamiento de la lesión de OTC. La tecnología suprema del balón garantiza el cruce de la lesión con confianza.

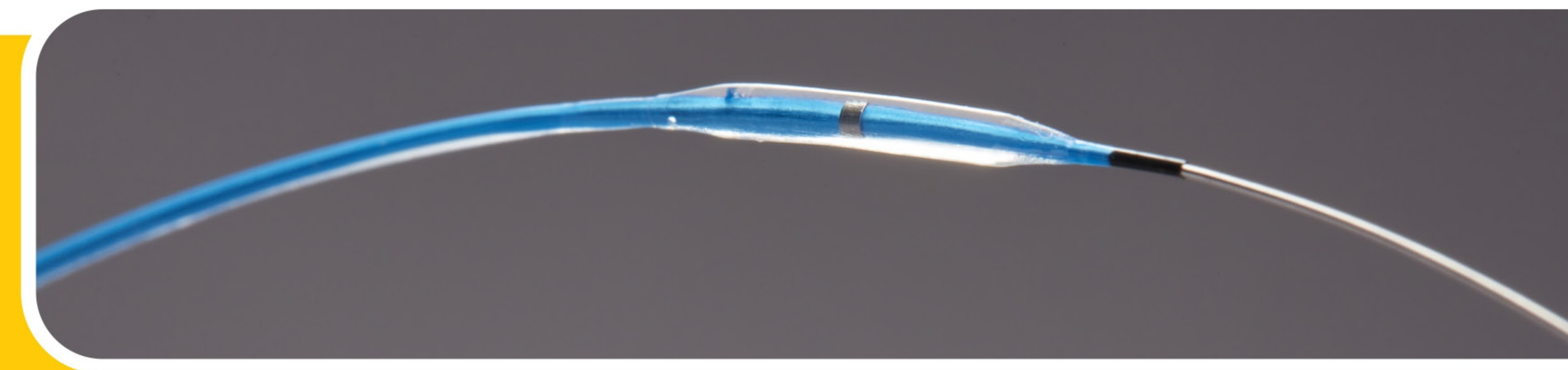

SUMMIT
CATÉTER CTO

Catéter de balón PTCA

Cruz

Seguimiento definitivo

- Baja fricción del cable guía
- Longitud larga del catéter

Empuje insuperable



- Los materiales Lumen combinan la flexibilidad con la rigidez de empuje necesaria
- Tubo hipo resistente a dobleces Polevault™
- Recubrimiento hidrófilo hasta la punta, incluida la zona del balón
- Configuración de alambre de refuerzo que permite una mayor capacidad de empuje

Cruz

- Pista de punta ajustada sobre el alambre guía
- Perfil de entrada de la punta 0,016" (0,40 mm)
- Perfil del balón distal 0,024" (0,62 mm)
- Perfiles de punta y balón diseñados en forma cónica

Inflar y terminar de forma segura

- Tiempo de inflación y deflación bajo
- Ráfaga nominal 15 atm

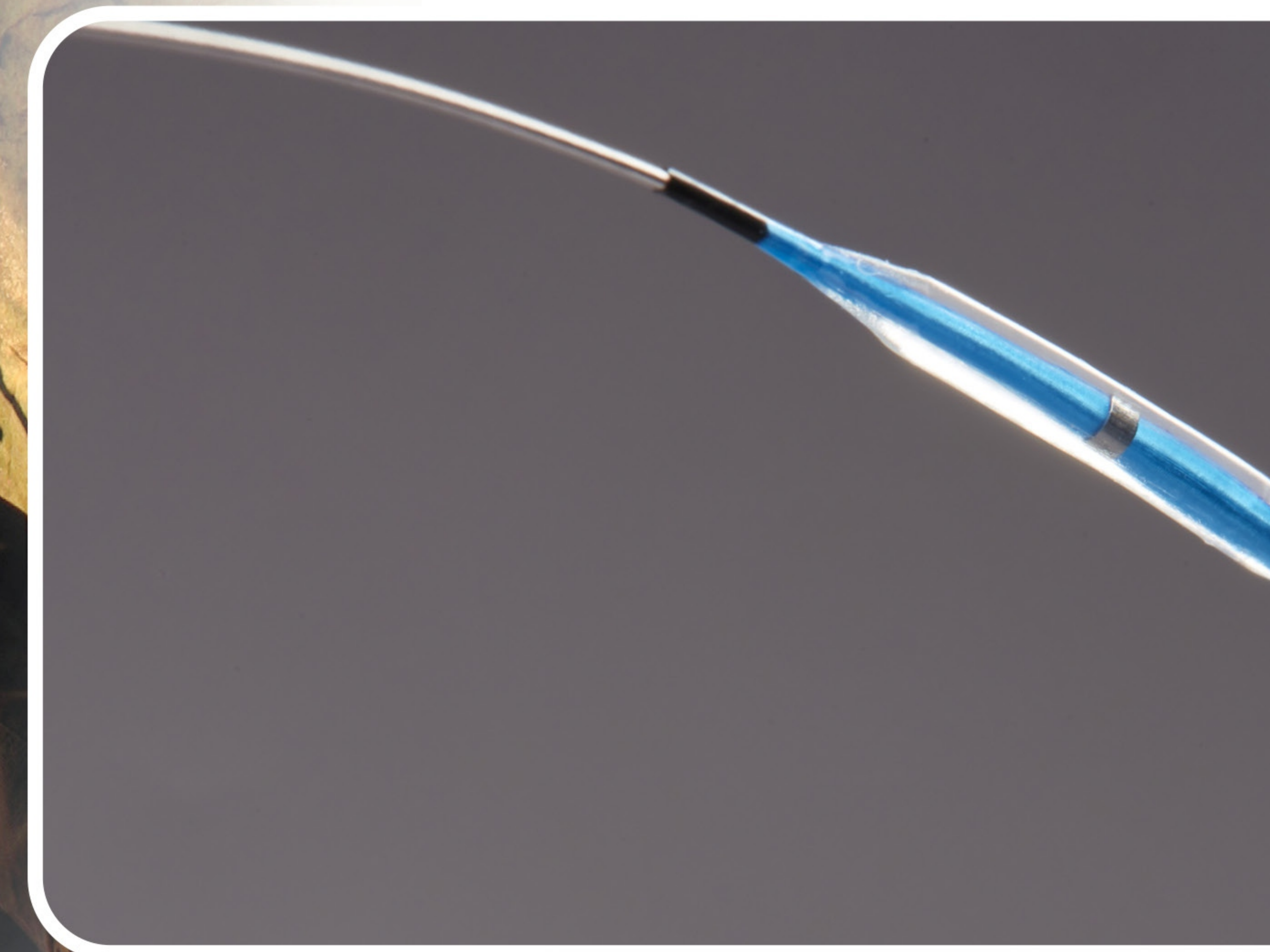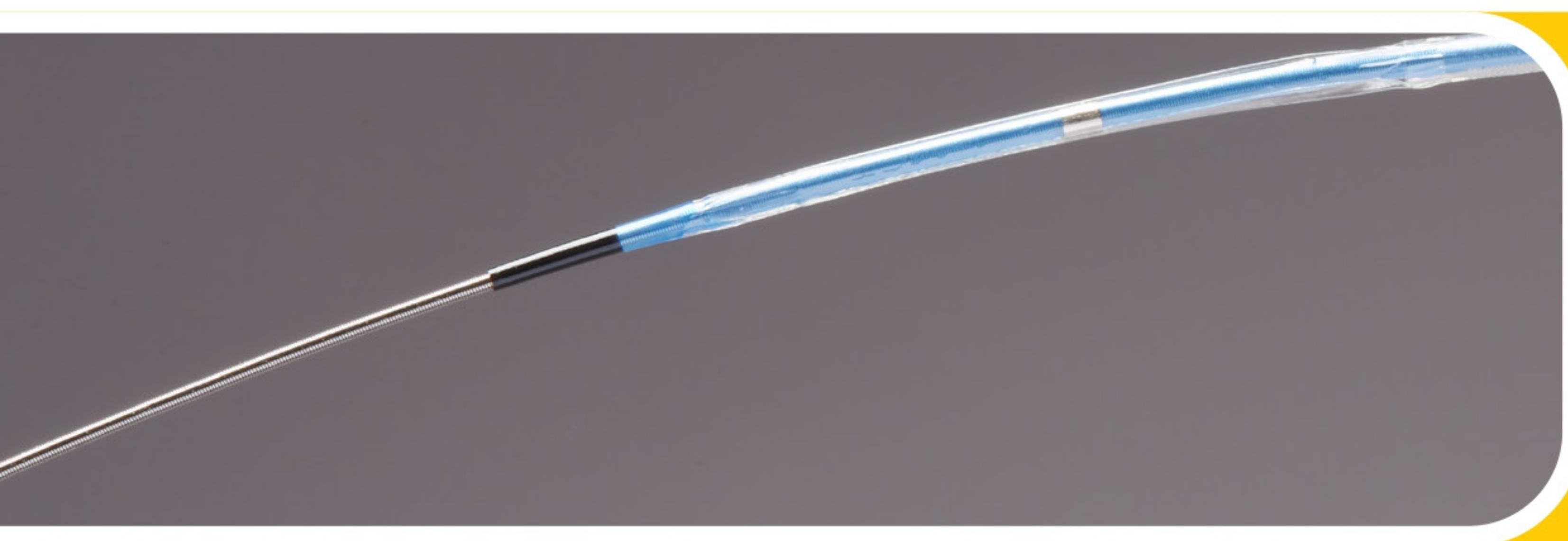

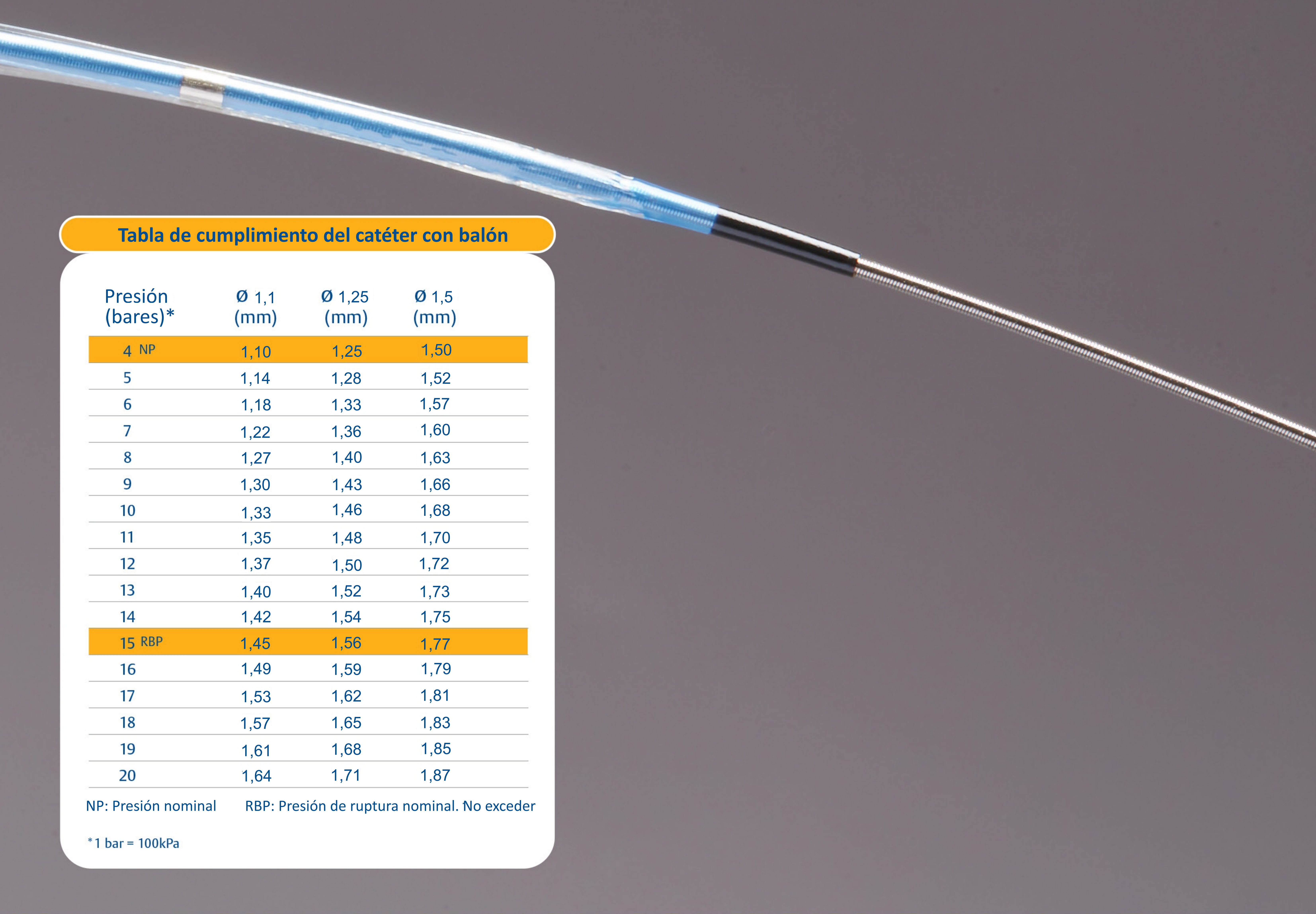


Tabla de cumplimiento del catéter con balón

Presión (bares)*	Ø 1,1 (mm)	Ø 1,25 (mm)	Ø 1,5 (mm)
4 NP	1,10	1,25	1,50
5	1,14	1,28	1,52
6	1,18	1,33	1,57
7	1,22	1,36	1,60
8	1,27	1,40	1,63
9	1,30	1,43	1,66
10	1,33	1,46	1,68
11	1,35	1,48	1,70
12	1,37	1,50	1,72
13	1,40	1,52	1,73
14	1,42	1,54	1,75
15 RBP	1,45	1,56	1,77
16	1,49	1,59	1,79
17	1,53	1,62	1,81
18	1,57	1,65	1,83
19	1,61	1,68	1,85
20	1,64	1,71	1,87

NP: Presión nominal RBP: Presión de ruptura nominal. No exceder

*1 bar = 100kPa

Datos técnicos

SUMMIT
CATÉTER CTO


Presión nominal	4 bares
Presión evaluada de ruptura	15 bares
Material del globo	Poliamida semielaborada sedosa para dimensiones controladas
Plegado	2 pliegues
Compatibilidad del catéter guía	5f (DI mín. 0,056"/1,42 mm)
Compatibilidad del alambre de guía tipo	Catéter máx. 0,014" (0,36 mm)
Eje proximal	Intercambio rápido
Eje distal	1,9F (0,64 mm)
Perfil de entrada en punta	2.□F (0.□□mm)
Longitud del catéter utilizable	0,016" (0,40 mm)
Punta cónica	154 cm
recubrimiento del catéter	3 mm
Vida útil	Revestimiento hidrófilo
	3 años desde la fecha de esterilización



Números de orden

		Diámetro (mm)		
Longitud (mm)	L \ Ø	1,10	1,25	1,50
	10	Sum1110	Sum1210	Sum1510
	15	Sum1115	Sum1215	Sum1515
	20	Sum1120	Sum1220	Sum1520

Descripción del número de pedido: SUUM DDLL (D=Diámetro, L=Longitud)

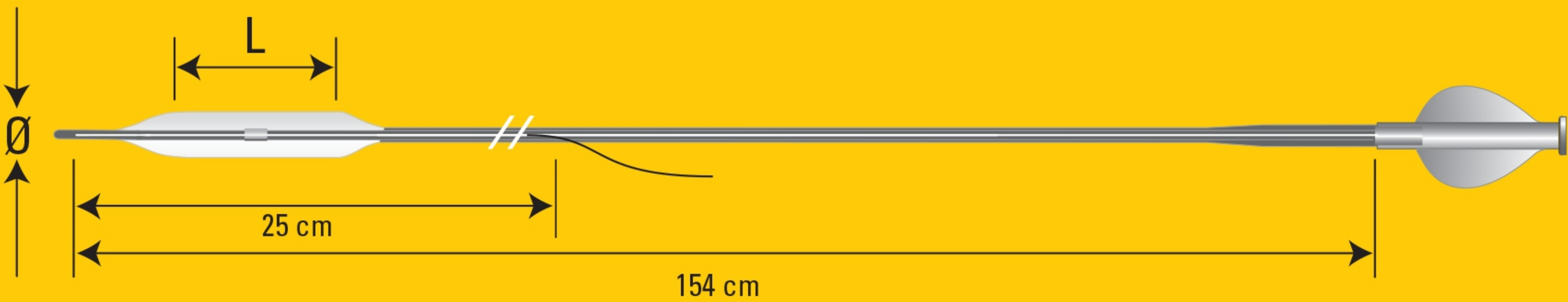

Una empresa del grupo Translumina

BLUE MEDICAL DEVICES B.V., PANOVENWEG 7, 5708 HR HELMOND, THE NETHERLANDS
PHONE: +31 (0)850 073 000, E-MAIL: sales@wellinq.com, WWW.WELLINQ.COM

Las indicaciones, contraindicaciones, advertencias e instrucciones de uso figuran en la etiqueta del producto.
Precaución: restringido a la venta por o bajo prescripción médica.

X3S9.0001.07 02/2023